

Polyvalent et flexible




Alpha miniRITE T R se recharge complètement en seulement 3 heures. Sa batterie Lithium-ion fournit suffisamment d'énergie pour une journée entière d'utilisation, que l'on soit sur la route ou à la maison, et cela, même avec une intense activité d'écoute en streaming (diffusion audio).

À la maison, la recharge est facile avec le **chargeur « plug & play »**. Sa conception autoportante et stable est fiable et pratique à utiliser.



nouveau

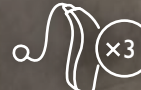

La batterie externe fournit 3 cycles de charge complets aux deux aides auditives Alpha miniRITE T R

Le couvercle maintient les aides auditives de façon sécurisée durant la charge ou le transport

La batterie externe se recharge complètement en 4 heures

Les aides auditives Alpha diffusent du son directement depuis les appareils iOS et Android™* avec la technologie sans fil Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz. Elles fonctionnent comme des écouteurs stéréo de haute qualité avec, en plus, la réduction du bruit ambiant pour profiter de la musique ou répondre aux appels téléphoniques.




Contrôle intuitif de l'aide auditive avec l'application **EasyControl-A*** de Bernafon

Made for iPhone | iPad | iPod Works with android

* Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez notre site internet : bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity. Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Réglages fins faciles dans Oasis^{next}

Le nouvel **Assistant d'adaptation** facilite les réglages fins dans le logiciel d'adaptation Oasis^{next}. Pour un résultat optimal, les ajustements du gain et des fonctionnalités sont suggérés d'après un ensemble prédéfini d'entrées d'utilisateurs finaux dans le cadre de situations d'écoute particulières.

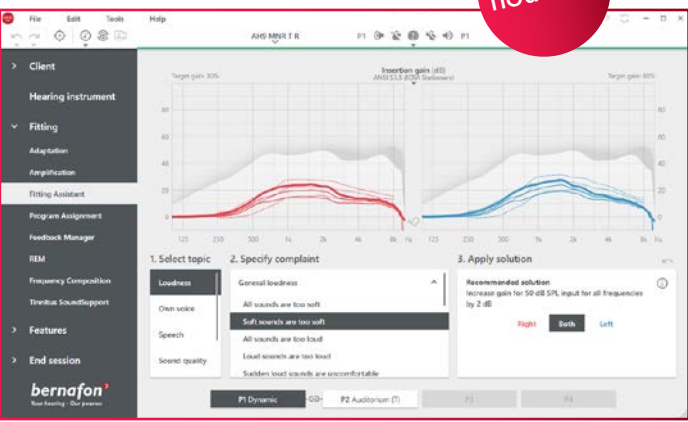

nouveau



Conversation guidée avec le patient



Intégration fluide à la consultation et au processus d'adaptation




Évaluation claire des besoins de l'utilisateur dans une majorité de situations d'écoute



Des suggestions pour les réglages fins sont présentées et peuvent être mises en œuvre immédiatement

L'Adaptation à distance Bernafon, appelée Remote Fitting, permet désormais de réaliser une **audiométrie in situ**. Une nouvelle fonction de mesure du niveau de bruit de fond contrôle les bruits gênants à l'endroit où se trouve le patient pour garantir des seuils d'audiométrie in situ valides.

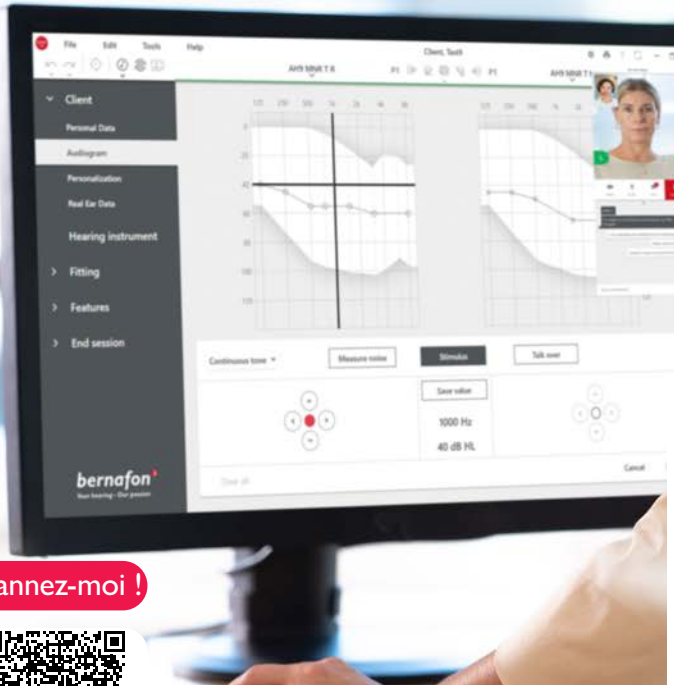

Scannez-moi !



Consultez bernafon.fr/professionals/oasis-fitting-software/about-remote-fitting pour commencer à utiliser Remote Fitting, l'Adaptation à distance Bernafon.



L'audiométrie in situ peut être aisément réalisée avec les aides auditives insérées




Vérifiez les seuils auditifs et validez un audiogramme à distance



Offrez un soutien pratique et en temps opportun à vos patients

Performance optimisée avec la Hybrid Technology™

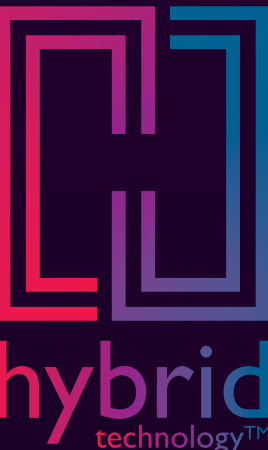

L'unique Hybrid Technology™ de Bernafon combine deux approches de traitement en un système hybride. Elle augmente la compréhension de la parole et le confort d'écoute simultanément dans d'innombrables situations d'écoute. Avec la flexibilité d'agir de façon indépendante ou en tandem, la Hybrid Technology™ trouve le juste équilibre pour un meilleur son sans compromis.


Répondez aux besoins spécifiques de vos patients avec de nouveaux styles et accessoires, tous dotés de l'innovante Hybrid Technology™ de Bernafon.

Les nouvelles aides auditives Alpha miniRITE T avec des piles zinc-air représentent le choix parfait pour les clients qui préfèrent les aides auditives non rechargeables.



Le nouveau **MicroShell** est un embout sur mesure conçu pour s'adapter confortablement aux conduits auditifs étroits.

Transmission NFMI à faible consommation d'énergie

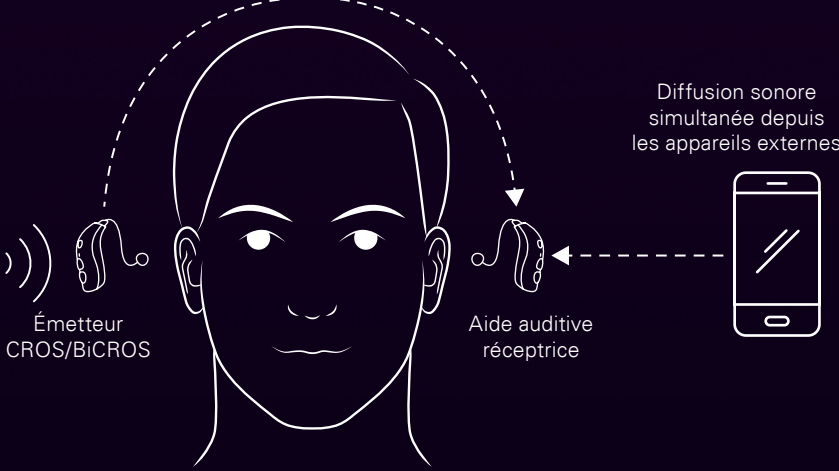

Les premières aides auditives **miniRITE T R sans fil CROS et BiCROS** de Bernafon offrent une bonne audibilité de la parole et une excellente qualité sonore pour les patients souffrant de surdité unilatérale. Grâce à Hybrid Noise Management™, le son est transmis avec le meilleur rapport signal/bruit possible (SNR) à l'aide auditive. Votre patient peut accéder au son en provenance de toutes les directions pour améliorer la localisation, tout en évitant un volume ou un Larsen excessifs.

Des résultats probants démontrent la performance exceptionnelle de Bernafon Alpha avec la Hybrid Technology™. Des essais cliniques réussis avec des utilisateurs finaux indiquent que :

93 % des patients testés comprennent la parole sans difficulté lorsqu'ils discutent dans un restaurant.

100 % des utilisateurs testés évaluent la qualité sonore d'Alpha comme excellente.

100 % des utilisateurs testés déclarent que la parole est claire dans les environnements bruyants.


94 % des patients testés ont perçu les sons ambiants et leurs voix comme naturels et n'ont pas été gênés par le Larsen.

Scannez-moi !




Pour plus d'informations sur la Hybrid Technology™, consultez cette page sur notre site internet : bernafon.fr/professionals/products/hybrid-technology.

* 2020 : Basés sur des données d'essais cliniques acquises à Bernafon AG, Berne, Suisse

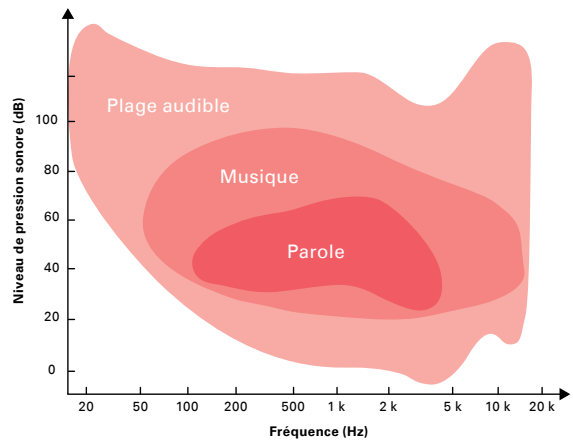

Le traitement de la musique ne s'envisage pas comme celui de la parole. Bernafon a toujours été conscient du besoin de traiter la musique de façon différente des sons de parole. Son spectre est plus variable avec des pics plus élevés et une plage de fréquences plus large. Bernafon a fait partie des pionniers du secteur et a lancé dès 2010 une technologie traitant spécifiquement la dynamique de la musique.*

La **technologie de nouvelle génération** de Bernafon traite la musique de façon encore plus explicite. Le nouveau programme Music Experience associe Hybrid Sound Processing™ avec un algorithme spécifiquement conçu pour la musique. L'algorithme musical utilise son propre système de compression indépendant pour amplifier la plage de fréquences plus large et dynamique des sons de la musique. Hybrid Sound Processing™ traite la musique de façon optimale avec une précision élevée et en temps réel, en se basant sur 48 000 estimations du signal par seconde. Ensemble, ils répondent à la dynamique de la musique qui évolue rapidement et fournissent une qualité sonore supérieure pour une expérience musicale bien équilibrée.

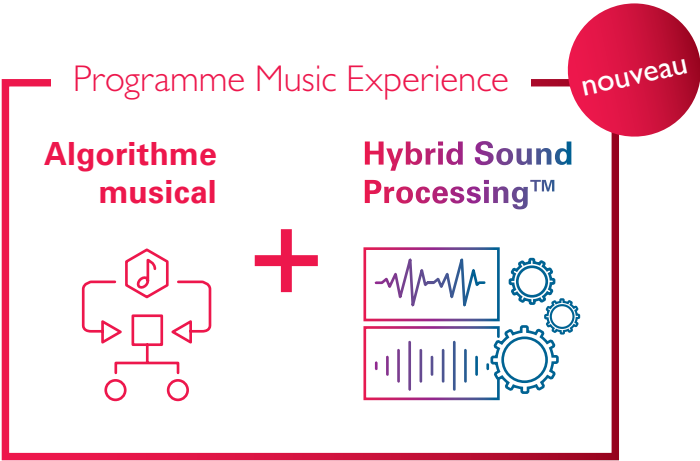

Bernafon a été fondé en 1946. Depuis, ses représentants et employés, répartis dans plus de 70 pays, travaillent sans relâche dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes d'audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur l'authenticité nous aident à remplir notre objectif :

Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.

Pour plus d'informations sur les aides auditives, rendez-vous sur le site web de **Bernafon**.

Siège Monde
Suisse
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

SOUND 
OF SWITZERLAND



Bernafon dans le monde
Afrique du Sud · Allemagne · Australie · Canada · Chine · Corée · Danemark · Espagne · Finlande · France · Italie · Japon · Nouvelle-Zélande · Pays-Bas · Pologne · Royaume Uni · Suède · Suisse · Turquie · USA

www.bernafon.fr

Bernafon is part of the Demant Group.
Bernafon est une marque du Groupe Demant.

bernafon®
Your hearing · Our passion

2021-07-30/2966101FF/subject to change



Alpha
Inspiré par le meilleur

-  **Music Experience**
-  **Charger Plus portable**
-  **Plus de styles d'aides auditives**
-  **Soutien supplémentaire pour les réglages fins**



bernafon®
Your hearing · Our passion

L'émotion est dans chaque **note**

Alpha est inspiré par ceux qui, dans le règne animal, sont dotés d'une audition exceptionnelle polyvalente et adaptative, pour gérer les situations d'écoute les plus rigoureuses. Fidèle à la mission de percevoir les meilleurs sons de chaque situation, Alpha capte l'émotion qui sort de chaque note, de chaque style de musique.

Faire de notre mieux pour faire ressortir de la musique, toute son émotion.
Véritable pionnier* du traitement de la musique par des aides auditives, Bernafon lance le nouveau programme appelé **Music Experience**. Avec Alpha, vos patients s'immergent dans une atmosphère musicale, aux sons musicaux riches et de haute qualité. Grâce à la performance de la Hybrid Technology™ et à l'expertise musicale reconnue de Bernafon, cette solution intégrale ouvre la voie à une nouvelle ère musicale. Que votre patient valse sur de la musique classique, joue dans un groupe de jazz, aille à des concerts de rock ou écoute les derniers titres connus à la radio – avec Alpha, le plaisir pur que procure l'écoute de la musique, tient à un simple changement de programme.



SIC

*Bernafon travaille depuis longtemps sur les sonorités musicales et porte une longue histoire concernant le traitement de la musique live et l'optimisation des avantages de la technologie des aides auditives pour les musiciens malentendants.
Pour plus d'informations sur le programme Music Experience et les résultats probants de Bernafon dans le domaine de la musique, visitez la page dédiée de notre site internet : bernafon.fr/professionals/products/alpha-music.

